



Limas Silk

Innovadoras limas rotatorias de NiTi que combinan flexibilidad y resistencia para obtener mejores resultados.

Las limas Silk MANI son instrumentos de endodoncia que le permiten agrandar el conducto radicular cortando la pared. Obtenga los beneficios de disponer de flexibilidad y resistencia al mismo tiempo. La combinación del material con tratamiento térmico especial y su forma destacada hacen que las limas Silk brinden una sensación táctil extraordinaria.

Silk MANI es un sistema fácil de aprender y utilizar. Como su nombre indica, Silk MANI se ha diseñado con un tratamiento térmico de última generación que brinda al usuario un control táctil, seguridad y eficiencia excelente. Las limas Silk MANI son lo suficientemente flexibles para pasar virtualmente por cualquier curvatura y lo suficientemente fuertes para resistir la fractura.

El diseño único de sección transversal en forma de lágrima corta de manera muy efectiva. Además,

los usuarios tienen la garantía de un menor efecto “atornillado” que reduce el riesgo de fractura al mínimo. Su especial diseño garantiza una eliminación rápida y efectiva de los residuos, por lo que trabajar con las limas Silk MANI es una experiencia segura y rápida. El tratamiento térmico parcial patentado de las limas NiTi combina flexibilidad, eficiencia y seguridad. El sistema se ha optimizado para reducir la cantidad de limas sin sacrificar la calidad de su tratamiento.

Características y beneficios



Flexibilidad



Dureza



Afilado



Fácil
identificación



Rápido



Punta
redondeada



Precisión



Limpieza rápida



No
contamina



Resistencia



Mínimamente
invasivo



Tratamiento térmico
parcial patentado

Limas Silk

Sus ventajas:

- Diseño único de sección transversal en forma de lágrima: corte excepcionalmente bueno y alta resistencia a la fractura, que eliminan el efecto de "atornillado".
- Retira el detritus de forma efectiva y reduce la tensión de los instrumentos.
- Tratamiento térmico pionero patentado:

Excelente flexibilidad sin sacrificar la eficiencia y seguridad.

- Fácil de aprender, fácil de utilizar: enfoque sencillo con 3 configuraciones para dar una correcta forma según la anatomía del canal.
- No es necesario ajustar el motor de Endo durante el tratamiento porque se utiliza una velocidad uniforme para todas las limas Silk.

Indicaciones:

- Ampliación del conducto radicular.
- Desbridamiento.

Identificación



Sección transversal en forma de lágrima única. Seguimiento seguro del canal radicular y reducción del "efecto atornillado".

Forma



Vista ampliada del estriado.



Uso

Trabaja con rotación continua. Utilice las limas Silk a la velocidad recomendada de 500 min⁻¹ con un ajuste de par de torsión inverso automático de 3.0 Ncm.

Tope de goma
Azul = 18 mm*
Blanco = 21 mm
Amarillo = 25 mm

Color
Tamaño de la punta de la lima




Estriados
2 = Taper de 0.04
3 = Taper de 0.06
4 = Taper de 0.08

*18 mm solo disponible como abridor de orificio.

Disponible en las siguientes unidades*

Tamaño	Colores
--------	---------

Simple 21 mm, 25 mm

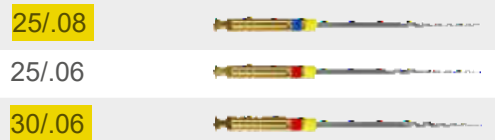

Estándar 21 mm, 25 mm



Complejo 21 mm, 25 mm



* Unidad más pequeña disponible: 3 piezas por paquete

* Otros tamaños disponibles en línea en www.schuetz-dental.com